

JCLS ELEMENTS

Our Vision 将来像

あなたの未来のそばに

Our Mission 使命

私たち JCLS グループは 100 年後の人々も幸せにします

Our Value 価値観

イノベティブな発想
多様性に富んだ共生
サステナブルなケアの探究

Our Credo 信条

生涯、お客様に寄り添う
最高の製品・技術・サービスをお届けする努力
未来を切り拓く挑戦者であれ

販売代理店 JCLS GROUP

北海道・東北・南関東・静岡ブロック

アップライド(株)

〒161-0034
東京都新宿区上落合 2-26-3 2F
TEL:03-6908-5851

北関東・甲信越・北陸ブロック

(株) マツオメディカル

〒336-0033
埼玉県さいたま市南区曲本 2-11-25
TEL:048-862-0401

中部・北陸・関西・四国ブロック

(株) ウェル・ネット研究所

〒664-0871
兵庫県伊丹市堀池 5-1-8
TEL:072-787-3738

中国・四国・九州・沖縄ブロック

(株) アンパサンド

〒808-0066
福岡県北九州市若松区くきのうみ中央 1-49
TEL:093-752-7171

製造・販売元

日本ケアリフトサービス株式会社
Japan Care Lift Service Co., Ltd.

〒664-0871 兵庫県伊丹市堀池 5-1-8

☎ 072-777-8857

✉ info@j-carelift.com

🌐 https://www.jcls.jp



-WEB-

詳しくは、お問い合わせください。

☎ 0120-188-027

(受付時間 / 平日9:00~17:00)

取扱販売店

2023.2

JCLS 介護リフトシリーズ

SOEL

SOLUTIONS FOR THE CONTINUUM OF
SAFE & RELIEF CARE.

vol. 02

信頼と実績を科学する

SOEL

皆様の100年後の未来を
幸せにするために

JCLS 介護リフトシリーズ 「SOEL -ソエル-」に込めた想い

私たち日本ケアリフトサービス (JCLS) がご提供する介護リフトシリーズ「SOEL -ソエル-」。そこには、介護を受ける方、介護する方、介護に関わるすべての方々に寄り添い、そっと手を添える (SOEL) ような存在であり続けたいという気持ちを込めました。そばにいて、安心と家族のような穏やかさを感じていただきたい、私たちJCLSはその気持ちを大事にして製品づくりを行ってまいります。




介護リフトシリーズ「CX・MX・BX」に込めた想い

アルファベットの「X」は、「Trans トランス = 超えて」という意味を表すことがあります。この意味に由来して、「CX」「MX」「BX」と名づけました。私たちJCLSはリフト製品の開発製造に留まらず、テクノロジーを活用し、製品を安全に安心してお使いいただける環境づくりを提供するという私たちの志を「X」で表現しています。

CX : Ceiling Lift / シーリングリフト (天井走行型)

MX : Mobile Lift / モバイルリフト (床走行型)

BX : Bath Lift / バスリフト (浴室設置型)

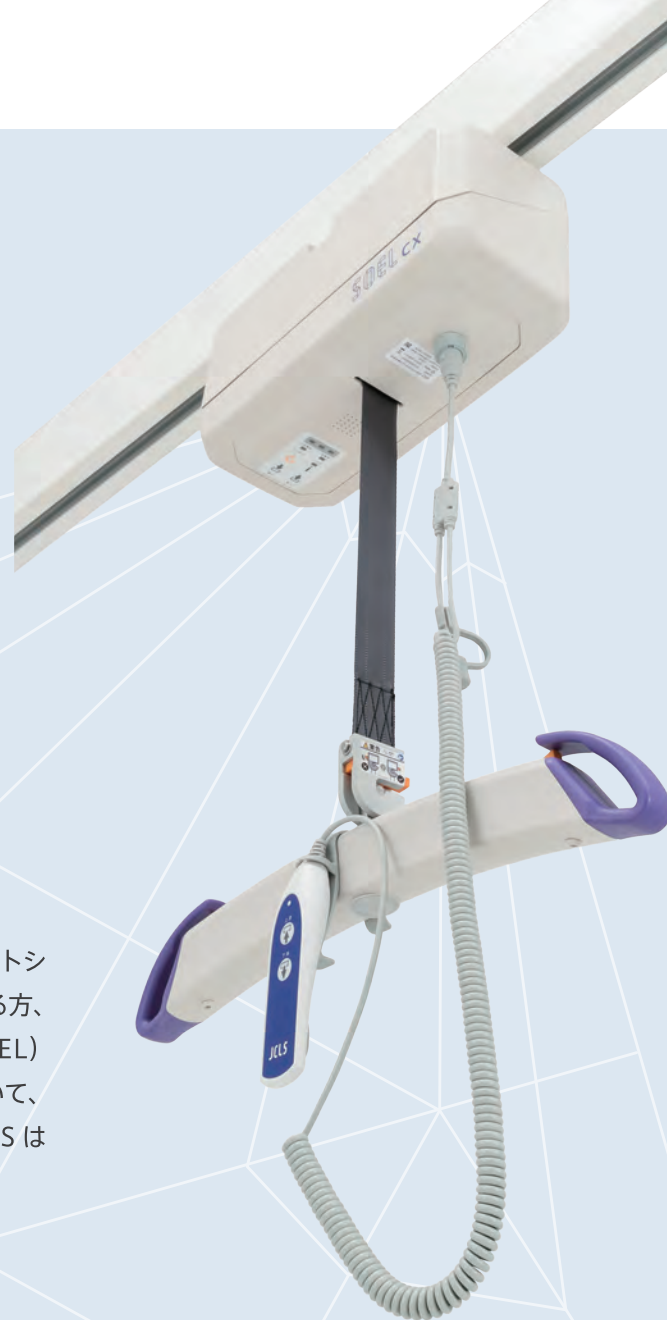

介護をする誰もが安心して使用できる安全な機能

1. スリングシートの抜け落ちを防止する、セーフティラッチ構造のハンガー [3機種共通]
2. 安全な使用を音声でサポートする音声アナウンス機能 [CX・BX]
3. エビデンスに基づくメンテナンスを可能とする使用履歴の記録機能 [CX・BX]
4. 揺れが少なく、下降時の着座操作が容易にできるベルト式の垂直昇降機能 [MX]
5. 要介護者のそばで安心して介助ができるすっきりとした本体デザイン [MX]

concept.
01

安全機能



日本のライフスタイルや介護ニーズに適応した仕様

1. 日本の入浴文化や多湿な気候に配慮した防滴・防湿性能 [CX・BX]
2. 女性や高齢の介助者でもリフト自体の移動や旋回、平行移動が軽く行える脚部構造デザイン (意匠登録済み) [MX]
3. 低床ベッド対応の脚部構造 [MX]

concept.
02

日本仕様




介護リフトのサブスクリプションサービス M.I.S. 見える化ツールを使って、リフト導入から定着までを月額でサポート

1. M.I.S. 専用の見える化ツールでリフト導入効果を数値で可視化
2. 介護環境に合わせたプランニングで、リフト 4 台から利用が可能
3. JCLS のインストラクターがリフト導入前から導入後の定着までをサポート
訪問・オンライン研修、動画コンテンツ視聴、LINE 相談窓口の利用が可能

concept.
03

サブスクリプション サービス

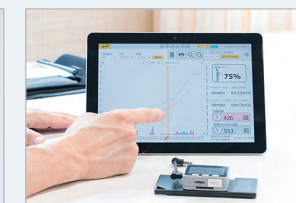

シーリングリフト / 天井走行型

日本製 / Made in Japan

SOELcx

- ソエル シーエックス -

製品コード：CX-AA-101

介護リフトの初心者でも安心して使用できるよう、安全な機能性を追求しました。安全な使用を丁寧にお知らせする音声アナウンス機能、スリングシートの抜け落ちを防止するハンガー仕様、入浴介護に適した防滴・防湿性能。



[各部仕様・特徴のご紹介]



本体操作ボタン

下降・上昇ボタン

手元スイッチが故障などで操作不能になった場合、本体から昇降操作ができます。

レポートボタン

充電残量や本体故障・異常などを音声で通知します。

充電ランプ各種

充電状況や充電残量レベルを確認できます。



昇降ユニット

防滴・防湿性

日本の入浴文化や多湿な気候に配慮した本体カバー設計で、優れた防滴・防湿性が備わっています。



音声アナウンス機能

検知機能

リフトの誤った使用や、本体の異常・故障を検知し、音声でお知らせします。

充電残量通知

充電残量が20%以下になると、本体操作ごとに充電残量をお知らせします。充電残量が5%以下になると、操作が下降のみに制限され、使用中の事故・トラブルを防止します。



緊急停止レバー 緊急さげ機能

緊急停止レバー

赤い専用ストラップを引くと緊急停止します。

緊急さげ機能

緊急停止後、さらに赤い専用ストラップをに引くと、自重による緊急下降ができます。



手元スイッチ

昇降ボタン

手元スイッチで昇降操作ができます。

防水性

直接水がかかっても故障しない、優れた防水性が備わっています。



ハンガー

セーフティラッチ構造

ハンガーフック部分の内側からロックがかかり、スリングシートのストラップが抜け落ちることを防止しつつ、フックから外しやすい機能を備えています。

CX レール各種

CX シーリングレールシステム 天井設置式レール

直線レール、面移動レール、連結レールなど、さまざまな種類のレールを用いて天井に設置します。お客様の介護環境に応じた最適なプランニングでシーリングリフト（天井走行型）をご利用いただけます。設置に工事が必要です。



CX-Cross 据置式4WAYレール

部屋の四隅に支柱を立て、設置スペース内で縦方向・横方向に自在に昇降ユニットを移動できる、据置式の4WAYレールタイプ。レールの長さを設置スペースに合わせて加工ができるので、さまざまなレイアウトに対応が可能です。設置に大きな工事が不要です。

製品コード	CX-CR-101	高さ	2275mm
TAISコード	01540-000008	幅	2000～4000mm
最大吊上げ荷重	120kg	奥行	2000～4000mm
重量	68kg～		

介護保険
特定福祉用具
貸与
適応商品



CX-Line 据置式ストレートレール

介護保険
特定福祉用具
貸与
適応商品

2本の支柱と1本の直線レールを組み合わせた、据置式のストレートレールタイプ。垂直昇降と横移動のシンプルな動きで、初めてリフトを使用する方でも操作が容易です。レールの長さを設置スペースに合わせて加工ができるので、さまざまなレイアウトに対応が可能です。設置に大きな工事が不要です。

製品コード	CX-LN-101	高さ	2315mm
TAISコード	01540-000009	幅	2000～4000mm
最大吊上げ荷重	120kg	奥行	1000mm
重量	38kg～		



CX-Line HL 移動式ストレートレール

据置式ストレートレールに、高さ調節とキャスター機能が加わった移動式のストレートレールタイプ。部屋間の移設や寝台用エレベーターでの移動が可能です。

製品コード	CX-HL-101	高さ	1800～2200mm
最大吊上げ荷重	120kg	幅	1955mm
重量	54kg	奥行	1000mm



モバイルリフト / 床走行型

SOELMX

- ソエル エムエックス -

製品コード：MX-AA-101 TAISコード：01540-000010

日本の介護ニーズに合わせて、女性や高齢の介護者でも本体移動が軽く行えます。ベルト式の垂直昇降で揺れが少なく、すっきりとした本体デザインで、要介護者のそばで介助がしやすく、安全に移乗が行えます。



[各部仕様・特徴のご紹介]



ハンドル 緊急停止ボタン

ハンドル
握りやすく操作がしやすい、人体工学に基づいたデザインです。

緊急停止ボタン
コントロールボックス上部の赤い専用ボタンを押し込むと、緊急停止します。



手元スイッチ

昇降ボタン
手元スイッチで昇降操作ができます。

脚部開閉ボタン
手元スイッチで脚部開閉ができます。

防水性
直接水がかかっても故障しない、優れた防水性が備わっています。




本体デザイン

安全仕様
ベルト式の垂直昇降は、安定した重心で揺れが少なく、下降時の着座操作が容易です。すっきりとした本体デザインで、要介護者のそばで介助がしやすく、安全に移乗が行えます。



緊急さげ機能

安全機能
充電切れや停電時など、本体の操作ができなくなった場合、アクチュエーター部分の赤い手動グリップを引くと、自重による緊急降下ができます。

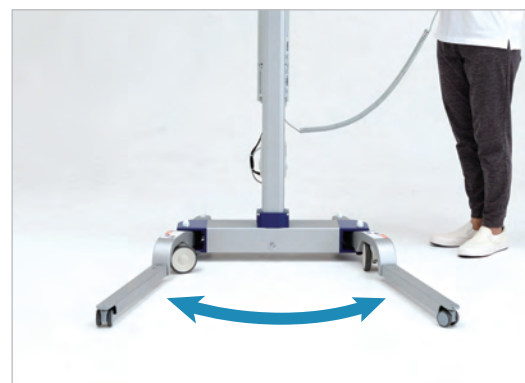

脚部電動開閉

脚部開閉
手元スイッチの脚部開閉ボタンで、安全に脚部の開閉操作ができます。



脚部構造

キャスター
独自の6輪仕様で本体の移動が軽く、女性や高齢の介護者でも楽に取り回せます。スムーズに平行移動や旋回ができ、限られたスペースでも使用しやすいです。

低床ベッド対応
低床ベッドに対応が可能な脚部仕様です。

バスリフト / 浴室設置型

日本製 / Made in Japan

SOEL BX

- ソエル ビーエックス -

製品コード：CX-BL-101

日本の入浴ニーズにお応えする、
大がかりな工事することなく浴室に
設置できるリフトです。



point. 01

床や壁を傷つけずに 設置可能

ユニットバスの床や壁を傷つけずに設置
ができ、大がかりな工事を必要としま
せん。リフト本体はバッテリー駆動の
ため浴室内の電気工事が不要です。

point. 02

さまざまな浴室に 設置可能

浴室の形状に合わせて設置ができます。

浴室介護用キャリアー

SOEL Carry

- ソエル キャリー -

製品コード：CX-SC-101

TAISコード：01540-000005

座面のフィット感や乗り心地を考慮し、安定し
た座位で入浴できる安全性を備えています。
安心してゆっくりと入浴を楽しめるリフト専用
キャリアーです。

介護保険
特定福祉用具
購入
適応商品



[セパレート機能]

キャリアーの座面部分と台車部分をセパレートするこ
とができるので、要介護者を乗せたままリフトで浴槽
へ移動し入浴ができます。

元の
状態



セパ
レート
した
状態



[ワンタッチロック機能]

青いレバーを下げると、ワンタッチ操作でロックが
解除され、座面部分を台車からセパレートすること
ができます。

ロッ
クの
状態



解
除
の
状態



重量	13.0kg (シート 6.7kg/ キャリー 6.3kg)	サイズ	高さ：930mm / 幅：525mm 奥行：810mm
耐荷重	100kg	キャスター径	前輪：100mm / 後輪：300mm
サイズ	前座高：455mm / 後座高：415mm		

SLING SEAT

SOEL High Back Sling - ソエル ハイバックスリング -

介護保険
特定福祉用具
**購入
適応商品**

頭から太ももまでを包み込むタイプで、身体全体のサポートが必要な方にご使用いただけるスリングシートです。

point. 01 ストレッチ生地で身体にフィット

伸縮性のある生地を使用しているので、身体によくフィットし、体幹をしっかりとささえてくれます。柔らかい素材で摩擦の負担が少なく、肌にも優しい生地です。

point. 02 座位姿勢での装着が簡単

車いすなどに座ったまま座位姿勢で装着ができ、要介護者の臀部の下まで敷くの便利な、スライディングポケットが付いています。

point. 03 浴室利用にも最適な機能性

抗カビ効果のある繊維を使用し、水抜けがよく通気性高いメッシュ素材なので、浴室での利用にも適しています。

サイズ	S	M	L
身長 (cm)	120 ~ 150	150 ~ 170	160 ~ 180

製品コード	SS-1010
耐荷重	200kg
素材	ポリエステル / ナイロン
サイズ	S・M・L

ATTENTION

- ・洗濯は湯温 40° C を限度として非常に弱い水流または手洗いで行ってください。
- ・漂白剤、乾燥機、アイロン、ドライ・ウェットクリーニングは使用できません。
- ・直射日光は避けて日陰で乾燥してください。
- ・スリングシートの消毒は弊社指定の消毒液をご使用ください。

SLING SEAT by WELLNET.Lab

SOEL High Back Sling は、日本を代表するスリングシートメーカーの老舗、ウェルネット研究所が開発。機能性・耐久性に優れ、SOEL シリーズに合わせたスタイリッシュな配色デザインの JCLS オリジナルのスリングシートです。ウェルネット研究所のスリングシートは P15・16 の一覧表をご参照ください。



仕様イメージ

TRANSFER GOODS

SOEL Care Gloves - ソエル ケアグローブ -

介護保険
特定福祉用具
**貸与
適応商品**

ベッド介助時の体位変換やポジショニング、リフト移乗時の圧抜きなどの際に摩擦を軽減し、介護する方と介護を受ける方の両方の負担を減らすスライディンググローブです。

point. 01 介護者の負担を軽減

point. 02 摩擦を軽減する材質

point. 03 お手入れも簡単

point. 04 名前の記入が可能



仕様イメージ

SOEL Care Sheet - ソエル ケアシート -

介護保険
特定福祉用具
**貸与
適応商品**

ベッド介助時の体位変換、移動、移乗の際の摩擦を軽減し介護する方と介護を受ける方の両方の負担を減らすスライディングシートです。

point. 01 全身をカバー出来て多くの 場面で使用可能

point. 02 摩擦を軽減する材質

point. 03 お手入れも簡単

製品コード	SS-101	素材	ナイロン 100%
TAIS コード	01540-000006	サイズ	200cm×145cm

ATTENTION

40℃以下の液温で手洗い、または洗濯機の弱水流で洗うようお願いします。洗剤は中性洗剤をご使用ください。洗濯後は形を整えて陰干ししてください。乾燥機のご使用はお避けください。塩素系除菌、殺菌剤を使用しないでください。



名前の記入が可能!

製品コード	SG-101	素材	ナイロン 100%
TAIS コード	01540-000007	サイズ	50cm×19cm

ATTENTION

40℃以下の液温で手洗い、または洗濯機の弱水流で洗うようお願いします。洗剤は中性洗剤をご使用ください。洗濯後は形を整えて陰干ししてください。乾燥機のご使用はお避けください。塩素系除菌、殺菌剤を使用しないでください。





介護リフトの導入・定着を月額サポート サブスクリプションサービス M.I.S.

M.I.S. の見える化ツールで、リフトの導入効果を数値で可視化します。介護リフトを4台から利用でき、リフト導入・定着をサポートするさまざまなサービスコンテンツと合わせて、月額費用で利用することができるサブスクリプションサービスです。

Point. 01 Malpos Major®

M.I.S. の見える化ツールで、リフト導入前と導入後の変化を数値化し、導入効果をレポートいたします。当社が独自開発した腰痛リスク計測機「Malpos Major® マルボスメジャー」は、リフト導入効果の見える化に欠かせないツールです。コルセット型の専用ベルトを装着し、介助時の腰痛リスクを数値化することができます。



Point. 02 Support

JCLS のインストラクターが、リフト導入前から導入後の定着までを丁寧にサポートします。訪問・オンライン研修、動画コンテンツ視聴、LINE 相談窓口など、充実したサポート体制でリフト定着を支援させていただきます。



Point. 03 Service Contents

M.I.S. の月額サービスコンテンツはこちら。

- Malpos Major 腰痛リスク計測
- 業務リスクアンケート調査
- 労働生産性コストチェック
- 介護リフトのご利用（4台〜）
- リフト研修 [訪問・オンライン]
- 動画コンテンツのご視聴
- 専用 LINE 相談窓口
- リフト導入運営用フォーマット各種

リフト導入開始から試用期間 3 ヶ月は月額無料でご利用いただけます。

詳しくはこちらへ



I SERVICE PACKS I

サブスクリプションサービス M.I.S. のさまざまなサービスコンテンツのうち、ご施設様のニーズに合わせて2つのサービスパックをご用意いたしました。

Pack. 01

Survey Pack

サーベイパック

M.I.S. の見える化ツールで、リフト導入効果を数値で可視化します。[2 回調査 / 1 セット] で実施し、1 回目と 2 回目でどのように変化したのかをレポートいたします。リフト導入の有無に限らず、現状の労働環境を把握し、安全性を向上させたいご施設様向けにも有効的なサービスパックです。

主なコンテンツ

- MalposMajor 腰痛リスク計測
- 業務リスクアンケート調査
- 労働生産性コストチェック



Pack. 02

Seminar Pack

セミナーパック

M.I.S. サービスコンテンツのうち、「リフト研修」と「動画コンテンツ視聴」をセットにいたしました。介護リフトの導入を検討されているご施設様から、すでに導入済みのご施設様まで、リフトの導入・活用状況に合わせた研修プランをご用意いたします。リフト活用に必要な知識・技術の習得をサポートする動画コンテンツ「Care Lift Support Movie」を合わせてご利用いただけます。

主なコンテンツ

- リフト研修 [訪問・オンライン]
- 動画コンテンツ視聴



SLING SEAT LIST



詳しくは、
ウェル・ネット研究所
オフィシャルサイトまで



形状により分類（一般的な分類）								
低			座位保持力			高		
身体全体のサポートが必要			多くのサポートが必要			身体の一部サポートが必要		
シート型		脚分離型		ハイジーン型		ベルト型		
Hight	Low	Hight	Low	Hight	Low	Hight	Low	
								
		スマートフィット ハイバック	スマートフィット ユニバーサル					
								
コンフォート シート ハイバック	コンフォート シート ローバック	コンフォート ハイバック コンフォート ハイバック スリム	コンフォート ローバック					セパレート
								
				ノンスリップ ライトスリング			ノンスリップ ハイジーン	
立上り・歩行のアシストの為		上下・左右移動、体位変換する為			ポジショニングや体位変換する為			
●体幹と太ももで体をやさしくサポートし、体重を分散して支えます。 ●座位姿勢でも着脱することができます。 ●サイズは3種類用意していますので、体格に合わせてお選びいただけます。 素材：ポリエステル繊維、合皮、ナイロン、ネオプレンゴム 		●独自の滑りやすい素材で、介助者によるベッド上での体位変換、上下・左右移動・おむつ交換などを少ない力で容易に行うことができます。 ●グリップがついていますので、リフトを併用することもできます。 ●体位変換用具を都度敷き込む必要がなくなります。 ●洗濯機で洗濯可能で、簡単にお手入れができます。 ●薄くて軽量なので、持ち運びにも便利です。 素材：ポリエステル、綿 			●寝返り等ベッド上での様々な介助動作を補助し、介助者の負担を軽減します。 ●介助を受ける方にとっても快適に体を動かすことができます。 ●通気性が高く、ベッドに敷いた状態でご利用いただけます。 ●洗濯機で洗え、お手入れが簡単です。 素材：ポリエステル、ポリプロピレン 質感：通気性及び弾力性がある素材で、体圧分散ができます。 			
Smart assist スマートアシストシリーズ		ライトターナー			ポジショニングスリング			

PRODUCT SPECIFICATIONS

CX 製品仕様

製品コード	・CX 昇降ユニット本体 [CX-AA-101] ・CX レールシステム各種 CX-Line [CX-LN-101] CX-Line HL [CX-HL-101] CX-Cross [CX-CR-101]	
本体サイズ	W370 × D160 × H160mm	
本体重量	9kg	
最大吊上げ荷重	200kg	
昇降範囲	2200mm	
昇降速度	100kg 負荷時 [上昇：40mm/ 秒・下降：40mm/ 秒]	
バッテリー	ニッケル水素 24V / 3.0Ah	
AC アダプタ	入力：100 ～ 240V・50/60Hz	
充電方法	・手元スイッチケーブル充電 ・エンドポイント充電（別途販売オプション） ※フル充電約 4 時間 / 負荷 100kg にて約 40 回昇降可能	
防水性能	本体：IPX4 / 手元スイッチ：IPX6	
作動音レベル	最大 55dB-A	
機能	・緊急停止機能：緊急停止レバー操作後に停止 ・緊急さげ機能：緊急停止後、さらに緊急停止レバー操作後に自重降下が可能 ・音声アナウンス機能 バッテリー残量通知 / ベルト交換通知 / メンテナンス通知（設定時のみ） 警告通知 [過大・過少負荷時 / ベルト斜め検知時 / 手元スイッチ断線時 / バッテリー・モーター異常検知時] 故障・エラー通知など ・過熱保護：音声通知後、一定温度に下がるまで停止 ・過大負荷保護：200kg 以上負荷時、音声通知後に上昇停止 ・過少負荷保護：無負荷時、音声通知後に下降停止 ・落下防止：遠心力ガバナ方式 ・スリープ機能：4 分間以上操作がない場合は自動的にスリープモード 本体または手元スイッチいずれかのボタンを操作後、スタンバイ復帰 ・情報記録：リアルタイムクロック搭載 記録情報 [日時 / リフト総移動量 / 昇降回数 / 充電回数 / エラー・故障回数]	



MX 製品仕様

製品コード	MX-AA-101	
TAIS コード	01540-000010	
主要材質	マスト：アルミニウム / 脚部：スチール	
本体重量	70kg	
最大吊上げ荷重	205kg	
昇降範囲	1200mm	
吊上げ高さ	580 ～ 1780mm ※床からハンガーまでの高さ	
昇降速度	・205kg 負荷時 [上昇：22mm/ 秒・下降：34mm/ 秒] ・100kg 負荷時 [上昇：27mm/ 秒・下降：34mm/ 秒] ・無負荷 [上昇：32mm/ 秒・下降：33mm/ 秒]	
高さ	1515 ～ 2110mm	
奥行	1250mm	
脚幅	700mm	
脚部開閉幅	700 ～ 1075mm	
脚部高さ	65mm	
キャスター径	前輪 50mm / 中輪 100mm / 後輪 75mm	
バッテリー	鉛蓄電池：24V / 2.9 Ah	
AC アダプタ	入力：100 ～ 240V・50/60 Hz	
充電方法	本体プラグ充電 ※フル充電 4 ～ 5 時間 / 負荷 100kg にて約 30 回昇降可能	
防水性能	本体：IPX4 / 手元スイッチ：IPX6	
機能	・脚部電動開閉：手元スイッチの脚部開閉ボタンで脚部の開閉操作が可能 ・緊急停止機能：緊急停止ボタン操作後に停止 ・緊急さげ機能：緊急降下用の手動グリップ操作後に自重降下が可能	



掲載製品の注意事項

- 製品改良により予告なく仕様・寸法・カラーなどを変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製造上の都合により予告なく製造中止または廃番とする場合がありますのでご了承ください。
- 印刷技術上、写真と実際の製品では色や質感が異なる場合がありますのでご了承ください。
- 製品に関する詳細は弊社までお問い合わせください。（専用ダイヤル / 0120-188-027）