

JCLS ELEMENTS

Our Vision 将来像

あなたの未来のそばに

Our Mission 使命

私たち JCLS グループは 100 年後の人々も幸せにします

Our Value 価値観

イノベティブな発想
多様性に富んだ共生
サステナブルなケアの探究

Our Credo 信条

生涯、お客様に寄り添う
最高の製品・技術・サービスをお届けする努力
未来を切り拓く挑戦者であれ

販売代理店 JCLS GROUP

北海道・東北・南関東・静岡ブロック

アップライド(株)

〒161-0034
東京都新宿区上落合 2-26-3 2F
TEL:03-6908-5851

中国・四国・九州・沖縄ブロック

(株) アンパサンド

〒808-0066
福岡県北九州市若松区くきのうみ中央 1-49
TEL:093-752-7171

中部・北陸・関西・四国ブロック

(株) ウェル・ネット研究所

〒664-0871
兵庫県伊丹市堀池 5-1-8
TEL:072-787-3738

北関東・甲信越・北陸ブロック

(株) マツオメディカル

〒336-0033
埼玉県さいたま市南区曲本 2-11-25
TEL:048-862-0401

製造・販売元

日本ケアリフトサービス株式会社
Japan Care Lift Service Co., Ltd.

〒664-0871 兵庫県伊丹市堀池 5-1-8

☎ 072-777-8857

✉ info@j-carelift.com

🌐 https://www.jcls.jp



-WEB-

詳しくは、お問い合わせください。

☎ 0120-188-027

(受付時間 / 平日9:00~17:00)

取扱販売店

2022.06-D

JCLS 介護リフトシリーズ

SOEL

SOLUTIONS FOR THE CONTINUUM OF
SAFE & RELIEF CARE.

vol. 01

信頼と実績を科学する

SOEL

皆様の100年後の未来を
幸せにするために

JCLS 介護リフトシリーズ 「SOEL -ソエル-」に込めた想い

私たち日本ケアリフトサービス (JCLS) がご提供する介護リフトシリーズ「SOEL-ソエル-」。そこには、介護を受ける方、介助をする方、介護に関わるすべての方々に寄り添い、そっと手を添える (SOEL) ような存在であり続けたいという気持ちを込めました。そばにいて、安心と家族のような穏やかさを感じていただきたい、私たちJCLSはその気持ちを大事にして製品づくりを行ってまいります。




シリーズ名「CX・BX・MX」に込めた想い

SOELシリーズの製品名に含まれる「X」は、「Trans = 超える・変化する」という意味を表わすことから、当社のリフト製品とサブスクリプションサービスを掛け合わせて、お客様と共に業務改善や労働環境の向上を支える志を表わしています。

CX: Ceiling Lift / シーリングリフト (天井走行型)

BX: Bath Lift / バスリフト (浴室用)

MX: Mobile Lift / モバイルリフト (床走行型)

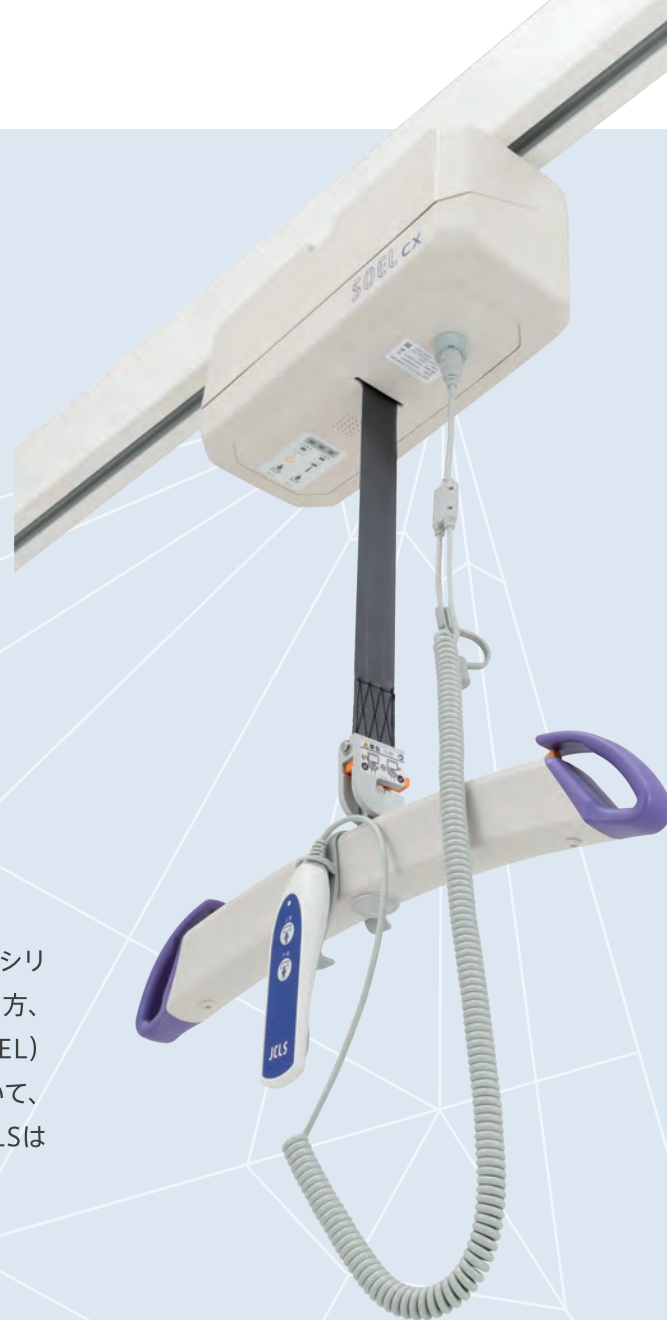

concept. 01

安全性の 向上

介護をする誰もが安心して使用できる安全な機能性

1. 安全性の優れたセーフティラッチ構造が備ったハンガー [全種共通]
2. 安全な使用を丁寧に知らせる音声アナウンス機能 [CX・BX 共通]
3. 本体メモリに記録された使用履歴を確認し、劣化状況に配慮したメンテナンスが可能 [CX・BX 共通]
4. ベルト式の垂直昇降で揺れずらく、すっきりとしたデザインで、要介護者の足元がリフト本体にあたる心配を軽減 [MX]



concept. 02

日本仕様

日本のライフスタイルや介護ニーズに適応した仕様

1. 多湿な気候と入浴文化に配慮し、優れた防滴・防湿性の外装設計 [CX・BX 共通]
2. 低床ベッドに対応可能な脚部構造 [MX]
3. 女性や高齢の介助者でも、リフト自体の移動や旋回、平行移動が軽く行えるキャスター仕様 [MX]



concept. 03

サブスクリプション サービス

M.I.S. で持続的に労働環境を向上

見える化ツールと介護リフトを組み合わせた、サブスクリプションサービス M.I.S.

1. SOELシリーズのリフト製品と以下を含むサービスを、月額でご利用可能
2. 腰痛・ストレスなど介護業務時のリスクを、リフト導入前と導入後の変化を見える化
3. リフト利用が初めてでも、導入前にインストラクターがしっかりレクチャー
4. リフト利用で困った時は、訪問もしくはオンラインでお客様をサポート



シーリングリフト / 天井走行型

日本製 / Made in Japan

SOELcx

- ソエル シーエックス -

製品コード：CX-AA-101

初心者でも安心して使用できるよう、安全性の高い機能を追求しました。丁寧にお知らせする音声アナウンス機能、スリングシートを安全に使用できるハンガー、入浴介護に適した高い防滴・防湿性が備わっています。



[各部仕様・特徴のご紹介]



本体操作ボタン

下降・上昇ボタン

手元スイッチ断線時など、本体から昇降操作が可能です。

レポートボタン

バッテリー残量や故障・異常の状況を音声で通知します。

充電ランプ各種

充電状況・バッテリー残量レベルの確認が可能です。



外装デザイン

防滴・防湿性

本体カバーの継ぎ目や隙間が最小限で、上部から水の侵入を防ぐ外装設計、日本特有の高湿な気候や入浴文化に配慮しています。



音声アナウンス機能

異常検知

リフト本体の異常や誤った使用を検知し、自動音声でお知らせします。

バッテリー残量通知

電源作動時、バッテリー残量20%以下時はボタン操作毎にバッテリー残量を通知してくれます。残量5%以下時は操作を下降のみに制限するなどの安全機能も備えています。



緊急停止 緊急さげ機能

緊急停止機能

赤い専用ストラップを1段階引くことで緊急停止が可能です。

緊急さげ機能


赤い専用ストラップを2段階引くことで、自重による緊急下降が可能です。



手元スイッチ

防水性

直接水がかかっても故障しない、優れた防水性が備わっています。

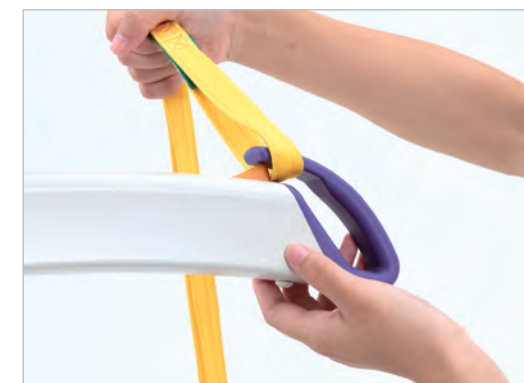

ハンガー

セーフティラッチ構造

スリングシートがフックに入りやすく抜けづらい安全性と、フックから外しやすい機能を備えた、セーフティラッチ構造のハンガーです。

CX レールシステム

CX シーリングレールシステム 天井設置式レール・タイプ

直線レール、面移動レールシステム、連結レールシステムなど、様々なレールを用いて、お客様の使用環境に応じたプランニングを行い設置いたします（工事を必要とします）。最適なケア環境をご提供いたします。



CX-Cross 据置式4WAYレール・タイプ

部屋の四隅に支柱を立て、縦方向に動くレールと昇降ユニットが横方向に動く線レールで、設置スペースの中を自在に面移動が可能です。レールの長さを設置スペースのサイズに合わせて加工ができ、大きな工事が不要で様々なサイズやレイアウトに対応可能です。

製品コード	CX-CR-101	高さ	2275mm
荷重	120kg	幅	2000～4000mm
重量	68kg	奥行	2000～4000mm



CX-Line 据置式ストレートレール・タイプ

2本の支柱と1本の固定レールを組み合わせた据置式のレールタイプ。垂直昇降と横移動のシンプルな動きで、初めてリフトを使用する方でも操作が容易です。レールの長さを設置スペースのサイズに合わせて加工ができ、大きな工事が不要で様々なサイズやレイアウトに対応可能です。

製品コード	CX-LN-101	高さ	2315mm
荷重	120kg	幅	2000～4000mm
重量	38kg	奥行	1000mm



CX-Line-HL 移動式ストレートレール・タイプ

CX-Line にガスダンパーの高さ調節とキャスター機能が付いたレールタイプ。部屋間の移設や寝台用エレベーターでの移動が可能です。

製品コード	CX-HL-101	高さ	1800～2200mm
荷重	120kg	幅	1955mm
重量	54kg	奥行	1000mm



モバイルリフト / 床走行型

SOELMX

- ソエル エムエックス -

製品コード：MX-AA-101 TAISコード：01540-000004

日本の介護ニーズに合わせて、女性や年配の介助者でもハンドル操作が楽に行えます。垂直昇降で揺れを防止し、すっきりとしたデザインで、要介護者の足元がリフト本体にあたる心配を軽減します。



[各部仕様・特徴のご紹介]



ハンドル

操作性

握りやすく操作がしやすい、人体工学に基づいた形状のデザインです。



手元スイッチ

脚部開閉ボタン

手元スイッチで脚部開閉が可能です。

防水性

直接水がかかっても故障しない、優れた防水性が備わっています。



本体デザイン

安全性


ベルト式の垂直昇降で要介護者が揺れづらく、着座の操作がしやすいので、より安全に昇降が可能です。すっきりとしたデザインで、要介護者の足元がリフト本体にあたる心配を軽減します。



緊急さげ機能

機能性

バッテリー切れや停電時など、本体操作が不能となった場合、アクチュエーター部分の専用レバーを引くことで、安全に自重降下が可能です。

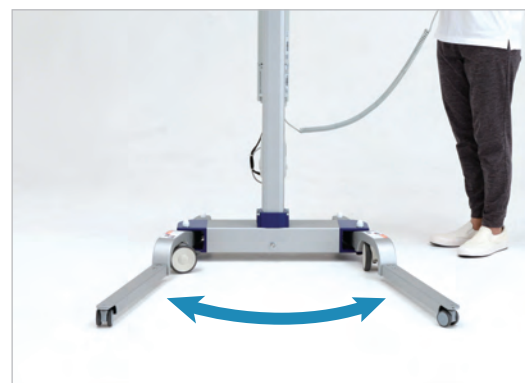

脚部電動開閉

操作性

手元スイッチの操作だけで、安全に脚部開閉が可能です。



脚部構造

キャスター

センターホイール構造により、女性や高齢の介助者でもリフト自体の移動や旋回、平行移動が軽く行えます。

低床ベッド対応

日本に多い低床ベッドに対応可能な脚部仕様です。

バスリフト / 浴室用

日本製 / Made in Japan

SOEL BX

- ソエル ビーエックス -

製品コード：CX-BL-101

日本の入浴ニーズにお応えする、大がかりな工事をすることなく浴室に設置できるリフトです。

point.
01

床や壁を傷つけずに
設置可能

ユニットバスの床や壁を傷つけずに設置ができ、また、リフト本体はバッテリー駆動のため電気工事が不要です。大がかりな工事を必要としないため、レンタルにも適しています。

point.
02

さまざまな浴室に
設置可能

浴室の形状に合わせた設置が可能です。



SLING SHEET [WELLNET.Lab / ウェル・ネット研究所]



ウェル・ネット研究所はJCLSグループの一社で、日本を代表するスリングシート・メーカーです。同社が生み出すオリジナルのスリングシートは、日本人の体形や骨格に心地よくフィットし、安定した姿勢を保持できます。日本の入浴文化にも適した撥水性・耐久性のある、強度の高い生地を素材から開発しています。

シリーズ／特徴

低 ← 座位保持力 → 高
身体全体のサポートが必要 多くのサポートが必要 身体の一部サポートが必要


Smart fit

スマートフィットシリーズ

使われている生地は、繊維製品における安全性の国際規格であるエコテックスを取得しています。縫製はトリコット製法で肌ざわりの良さとフィット感を実現しています。また柔らかさ、適度な伸縮性があり、表面の摩擦を軽減していますので着脱が容易に行えます。



スマートフィット
ハイバック

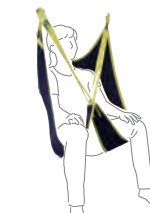

スマートフィット
ユニバーサル

Comfort

コンフォートシリーズ

メッシュ生地で水抜けが良く入浴での使用に適しています。生地が薄く適度に摩擦があり、伸縮しますので、より体にぴったりと接することで体幹のくずれを止めることができます。また通気性が良いのでムレにくい素材です。



コンフォート
シート
ハイバック




コンフォート
シート
ローバック



コンフォート
シート
ハイバック スリム



コンフォート
シート
ハイバック

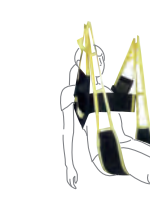

コンフォート
シート
ハイバック



コンフォート
シート
ハイバック

Non slip

ノンスリップシリーズ

生地は撥水性の強いフリクションPP。汚れづらく衛生的にご使用できます。適度な厚みがあり、身体に食い込まず、生地全体で重さを受けることができます。表面は適度な摩擦があり、生地の面積の少ないシートに採用しています。



ノンスリップ
ライトスリング



ノンスリップ
ハイテンション

立上り・歩行のアシストの為

ポジショニングや体位変換する為

Smart assist

スマートアシストシリーズ

介護する方とされる方を様々な場合でアシストするシリーズです。体重を免荷し、歩行をサポートするジャケットやベッド上での介助をアシストするポジショニングスリングシート等、それぞれの目的に適した素材で製作しております。



ウォーキングジャケット



ポジショニングスリング

※ 詳しくは、裏面 JCLS グループ一覧よりお問合せください。

The future of safety care, SOEL
Japan Care Lift Service Co., Ltd.

10

SOEL Carry -ソエルキャリー-

本体価格：298,500円（税込価格：328,350円）

SOEL Carryは、座面のフィット感や乗り心地を追究し、安定した座位で入浴できる安全性を備えた、安心してゆっくりと入浴を楽しめるリフト専用キャリーです。

製品コード	CX-SC-101
TAISコード	01540-000005
重量	13.0kg / シート 6.7kg・キャリー 6.3kg
耐荷重	100kg
サイズ	高さ：930mm 幅：525mm 奥行：810mm
座高	前座高：455mm 後座高：415mm
キャスター径	前輪 100mm・後輪 300mm



[ワンタッチロック機能]

簡単なワンタッチ操作で椅子部分と台車部分が上下に分離し、椅子部分を元の位置に降ろすと自然にロックがかかります。



ロックの状態



解除の状態



介護する側にも、される側にもやさしい、
介護リフトのサブスクリプション。

M.I.S.は、労働安全衛生マネジメントシステムの方針を取り入れ、独自の見える化ツールとリフト導入を組み合わせ、介護施設の業務改善と労働環境の向上をサポートする、介護リフトのサブスクリプションサービスです。

Point. 01

リフト導入前に介護施設内の労働環境の問題や課題を抽出し、現状把握を行います。リフト導入後にどう変化・改善したのかを見える化し、課題の抽出と解決を繰り返し、持続的に労働環境を向上させるシステムをお客様と共に作り上げていきます。



Point. 02

M.I.S.の見える化ツールの代表的な一つが、移乗時の腰痛リスクとストレスを測定する、当社独自開発「Malpos Major®（マルポスマジャー）」。

リフト導入前と導入後の測定値の変化をご確認いただき、労働環境が向上しているのかを実際の数値を見て検証することができます。

Point.03

M.I.S.は、月額でこれだけのサービスをご利用頂けます。

- 介護リフトの利用
- リフト導入レクチャー
- 介護サポート動画コンテンツ
- 訪問 & オンラインサポート
- 介護腰痛リスク & ストレス測定
- 労働環境リスクアンケート調査
- 施設運営コスト削減試算表

リフト導入開始から効果を測定する3か月間は、導入試験期間として無料でご利用いただけます。

詳しくはこちらへ



PRODUCT SPECIFICATIONS

CX 製品仕様

製品コード	・CX 昇降ユニット本体 [CX-AA-101] ・CX レールシステム 各種 CX-Line [CX-LN-101] CX-Line HL [CX-HL-101] CX-Cross [CX-CR-101]	
本体サイズ	W370×D160×H160mm	
本体重量	9kg	
最大吊上げ荷重	200kg	
最上範囲	2200mm	
昇降速度	100kg 負荷時 [上昇: 40mm/秒・下降: 40mm/秒]	
バッテリー	ニッケル水素 24V / 3.0Ah	
AC アダプタ	入力: 100 ~ 240V・50/60Hz	
充電方法	・手元スイッチケーブル充電 ・エンドポイント充電 (別途販売オプション) フル充電約4時間 / 負荷 100kg にて約 40 回昇降可能	
防水・防塵規格	本体: IPX4 / 手元スイッチ: IPX6	
作動音レベル	最大 55dB-A	
機能	・緊急停止機能: 専用レバー操作後に停止 ・緊急さげ機能: 緊急停止後、専用レバー操作中は自重降下が可能 ・音声アナウンス機能 バッテリー残量通知 / ベルト交換通知 / メンテナンス通知 (設定時のみ) 警告通知 [過大・過少負荷時 / ベルト斜め検知時 / 手元スイッチ断線時 / バッテリー・モーター異常発生時] 故障・エラー通知など ・過熱保護: 音声通知後、一定温度に下がるまで停止 ・過大負荷保護: 200kg 以上負荷時、音声通知後に上昇停止 ・過少負荷保護: 無負荷時、音声通知後に下降停止 ・落下防止: 遠心力ガバナ方式 ・スリープ機能: 4 分間以上操作がない場合は自動的にスリープモード ※本体または手元スイッチいずれかのボタンを操作後、スタンバイ復帰 ・情報記録: リアルタイムクロック搭載 記録情報 [日時 / リフト総移動量 / 昇降回数 / 充電回数 / エラー・故障回数]	

BX 製品仕様

製品コード	CX-BL-101	
躯体材質	アルミニウム	
重量	45kg	
支柱高さ	1900 ~ 2230mm	
アーム長さ	889mm	
アーム回旋範囲	191°	
耐荷重	120kg	
昇降ユニット	SOEL CX ※上記 CX 製品仕様と同一	

MX 製品仕様

製品コード	MX-AA-101	
TAISコード	01540-000004	
主要材質	マスト：アルミニウム / 脚部：スチール	
本体重量	70kg	
最大吊上げ荷重	205kg	
昇降範囲	1200mm	
吊上げ高さ	580～1780mm ※床からハンガーまでの高さ	
昇降速度	・205kg負荷時 [上昇：22mm/秒・下降：34mm/秒] ・100kg負荷時 [上昇：27mm/秒・下降：34mm/秒] ・無負荷 [上昇：32mm/秒・下降：33mm/秒]	
高さ	1515～2110mm	
奥行	1250mm	
脚幅	700mm	
脚部開閉幅	700mm～1075mm	
脚部高さ	65mm	
キャスター径	前輪 50mm / 中輪 100 mm / 後輪 75mm	
バッテリー	鉛蓄電池：24V / 2.9Ah	
AC アダプタ	入力：100～240V・50/60Hz	
充電方法	本体プラグ充電 / フル充電 4～5時間	
防水性能	本体：IPX4 / 手元スイッチ：IPX6	
機能	・脚部電動開閉：手元スイッチのボタン操作で脚部開閉が可能 ・緊急停止機能：緊急停止ボタンを操作後に停止 ・緊急さげ機能：緊急降下ボタンまたは手動グリップを操作中は自重降下が可能	



掲載製品の注意事項

- 製品改良により予告なく仕様・寸法・カラーなどを変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製造上の都合により予告なく製造中止または廃番とする場合がありますのでご了承ください。
- 印刷技術上、写真と実際の製品では色や質感が異なる場合がありますのでご了承ください。
- 製品に関する詳細は弊社までお問い合わせください。(専用ダイヤル / 0120-188-027)